


AURA-DENTAL



Katalog 2009

Messgeräte

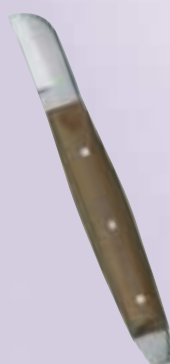

● Dial Caliper D

Art.-Nr. 01.0004.

Der Dial Caliper D ist der erste digitale Schnelltester für den Dentalmarkt zur exakten Beurteilung von Kronenwandstärken.

Bei rein mechanischen Messgeräten mit Nadelanzeige kommt es aufgrund unterschiedlicher Instrumentenhaltung und Blickwinkel immer wieder zu Ablesefehlern. Die digitale Anzeige ist aus jedem Blickwinkel gut ablesbar und gibt sofort das Messergebnis an. Das Gerät kann zwischen den Maßeinheiten mm und inch umgeschaltet werden.

Messbereich: 0 - 14 mm
Einteilung: 0,01 mm
Toleranzen: 0,02 mm
Batterie: 1,5V Knopfzelle

● Dial Caliper D

Art.-No. 01.0004.

The Dial Caliper D is the first digital measuring tool for the dental market to control precisely the thickness of crowns.

Measuring range: 0 - 14 mm
Resolution: 0.01 mm
Tolerance: 0.02 mm
Power: 1.5V button cell



● Dial Caliper D mit auswechselbaren Messspitzen

Art.-Nr. 01.0008.

Der digitale Caliper D wurde modifiziert und ist jetzt mit auswechselbaren Spitzeneinsätzen lieferbar. Im Lieferumfang sind enthalten jeweils ein Paar:

- Dünne Messspitzen für Metall (Standardausrüstung wie Dial Caliper D 01.0004.)
- abgerundete Messspitzen für Wachs
- scheibenförmige Messspitzen flächige Messungen

● Dial Caliper D with exchangeable tips

Art.-No . 01.0008.

This is a modified shape of the digital Caliper D 01.0004. It is now available with exchangeable tips. Three different pairs of tips are included:

- thin pointed tips (standard equipment) as Dial Caliper D 01.0004.
- rounded tips for wax
- plate shaped tips for thickness measurements of base plates

Messgeräte



● Digitaler Messschieber


Art.-Nr. 01.0009.

Messbereich: 0 - 15 cm
Einteilung: 0,1 mm
Toleranzen: +/- 0,03 mm

● Digital Caliper

Art.-No. 01.0009.

Measuring range: 0 - 15 cm
Resolution: 0.1 mm
Tolerance: +/- 0.03 mm

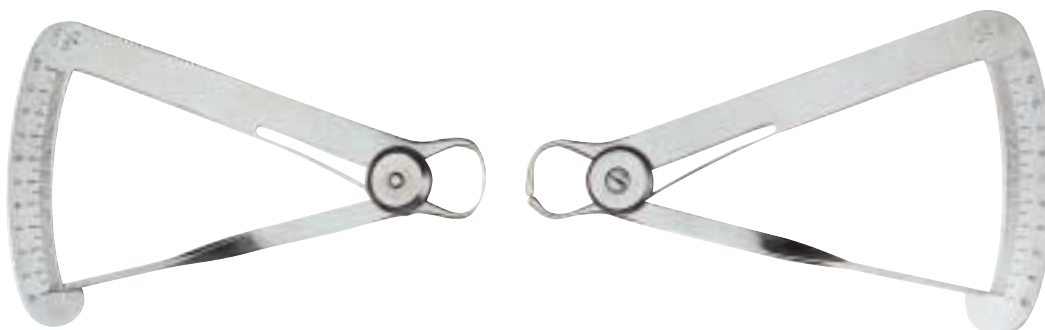

● Tasterzirkel

Art.-Nr. 01.0005. - feine Messspitzen für Metall

Art.-Nr. 01.0006. - abgerundete Messspitzen für Wachs

Einfaches Wandstärkenmessgerät nach Iwanson, rostfrei, beidseitig ablesbar.

Messbereich: 0 - 10 mm - Ablesung: 0,1 mm

● Iwanson Caliper

Art.-No. 01.0005. - thin measuring tips for metal

Art.-No. 01.0006. - round measuring tips for wax

Simple measuring instrument for thickness control of crowns and bridges (stainless), readable on both sides.

Measuring range: 0 - 10 mm - reading value: 0.1 mm



● Schiebelehre nach Bohley

Art.-Nr. 09.1050.

Messschieber mit Feststellhebel, Länge 15 cm.
Messbereich 0 - 10 cm

● Device Bohley

Art.-No. 09.1050.

Length: 15 cm, measuring range 0 - 10 cm

Messgeräte

● Praecimeter

Art.-Nr. 01.0001.

Analoger Schnelltaster
Messbereich: 0 - 10 mm
Einteilung: 0,01 mm

● Praecimeter

Art.-No. 01.0001.

Dial Caliper
Measuring range: 0 - 10 mm
Resolution: 0.01 mm



● Dial Caliper N M/W

Art.-Nr. 01.0003.

Analoger Schnelltaster mit auswechselbaren
Messspitzen für Metall und Wachs

Messbereich: 0 - 10 mm
Einteilung: 0,1 mm

● Dial Caliper N M/W

Art.-No. 01.0003.

Dial Caliper with exchangeable measuring tips
for metal and wax

Measuring range: 0 - 10 mm
Resolution: 0.1 mm

Kopfbandlupe



● Stereo-Kopfbandlupe

Art.-Nr. 01.5000.

Wie 01.5004. mit vier Vergrößerungen (1,2x/1,8x/2,5x/3,5x) als Set komplett.

Bei dieser Konstruktion hat der Anwender freie Rundumsicht, da ohne Schildabdeckung.

Ersatzlinsen

	Art.-Nr.	Arbeitsabstand
1,2x:	01.5003.1,2x	520 - 620 mm
1,8x:	01.5003.1,8x	230 - 320 mm
2,5x:	01.5003.2,5x	150 - 230 mm
3,5x:	01.5003.3,5x	80 - 120 mm

● Headband Magnifier

Art.-No. 01.5000.

Head Band Magnifier Set with four lenses (1.2x/1.8x/2.5x/3.5x) as Head Band Magnifier LED. With this shape the user has free panorama view, as there is no disturbing peak.

Replacement lenses

	Art.-No.	Target distance
1.2x:	01.5003.1,2x	520 - 620 mm
1.8x:	01.5003.1,8x	230 - 320 mm
2.5x:	01.5003.2,5x	150 - 230 mm
3.5x:	01.5003.3,5x	80 - 120 mm



● Lupenbrillen - Set

Art.-Nr. 01.5050.

Superleichtes Brillengestell mit 2 verschiedenen Stereo-Lupen (Vergrößerung 1,5x / 2,0x). Die Lupeneinsätze können hochgeklappt werden für Normalansicht.

Ersatzlinsen

1,5x:	01.5050.1,5x
2,0x:	01.5050.2,0x

● Magnifier Glasses Set

Art.-No. 01.5050.

Very light frame construction with two lenses (magnification: 1.5x /2.0x).

Lenses can be flipped-up for normal view.

Replacement lenses

1.5x:	01.5050.1.5x
2.0x:	01.5050.2.0x



● Brillen-Vorsetzlupe

Art.-Nr. 01.5060.

Einfach mit Clip auf normalen Brillengestellen fixieren. (Für Normalansicht hochklappbar)
Vergrößerung: 2,0x

● Glasses Style Magnifier

Art.-No. 01.5060.

It is easy to clip onto the frame of your glasses. Flip-down for super magnified image or flip up for normal view.
Magnification: 2.0x

Kopfbandlupe



● Stereo-Kopfbandlupe LED

Art.-Nr. 01.5004.

Superleichte Stereokopfbandlupe für Zahnärzte und Zahntechniker mit vier verschiedenen Stereolupenteilen. Die Auswahl von vier Vergrößerungen ermöglicht jedem Anwender eine für ihn optimale Einstellung der Sichtverhältnisse bei entsprechendem Arbeitsabstand. Die Zusatzleuchte ist flexibel einstellbar und sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes. Das Lampenteil mit dem Batteriefach ist abnehmbar und kann unabhängig eingesetzt werden. Benötigt werden drei Batterien (AAA 1,5V) mit einer Brenndauer von ca. 40 - 50 Stunden. Diese Kopfbandlupe kann auch problemlos von Brillenträgern verwendet werden.

Gewicht: 140 g
Batterie: 3 x 1,5V

Ersatzlinsen

	Art.-Nr.	Arbeitsabstand
1,2x:	01.5003.1,2x	520 - 620 mm
1,8x:	01.5003.1,8x	230 - 320 mm
2,5x:	01.5003.2,5x	150 - 230 mm
3,5x:	01.5003.3,5x	80 - 120 mm

● Headband Magnifier LED

Art.-No. 01.5004.

Very light headband magnifier with lighting and four different magnifications, suitable for dentists and dental technicians. As every user has different working positions and requires different magnifications with different target distances, this headband magnifier offers the optimal adjustment for individual users. The LED part with battery box can be taken off and used separately. Battery size: No. 4 AAA 1.5V life is about 40h - 50h.

Weight: 140 g
Power: 3 x 1.5V

Replacement lenses

	Art.-No.	Target distance
1.2x:	01.5003.1,2x	520 - 620 mm
1.8x:	01.5003.1,8x	230 - 320 mm
2.5x:	01.5003.2,5x	150 - 230 mm
3.5x:	01.5003.3,5x	80 - 120 mm

Kopfbandlupe



● Stereo-Kopfbandlupe 1,8x, 2,3x, 4,8x

Art.-Nr. 01.5001.

Die Kopfbandlupe hat drei Vergrößerungsmöglichkeiten. Zwei Lupenteile sind einfach „zuzuschalten“, so dass 1,8fache, 2,3fache und 4,8fache Vergrößerung möglich ist. Das Stereolupenteil (1) mit 1,8facher Vergrößerung hat ein sehr großes Sehfeld (ca. 8 x 6 cm) und eine Tiefenschärfe von ca. 5 cm. Der freie Arbeitsabstand beträgt ca. 27 cm. Unter dem Schirmschild befindet sich ein weiteres Stereolupenteil (2). Durch einen einfachen Klappmechanismus kann es zugeschaltet und damit die Vergrößerung auf das 2,3fache erhöht werden. Für schnelle mikroskopische Betrachtungen kann nochmals einseitig eine weitere Lupe (3) vorgeschaltet werden, die eine Gesamtvergrößerung um das 4,8fache ermöglicht.

Die Kopfbandlupe ist für Brillenträger geeignet. Das variable Band wird der Kopfform mit einem Klettverschluss angepasst. Das Schirmschild ist hochklappbar. Das geringe Gewicht von nur 110 g, das hautfreundliche Material und die anatomische Form des Kopfbandes sorgen für hohen Tragekomfort.



● Headband Magnifier 1.8x, 2.3x, 4.8x

Art.-No. 01.5001.

Magnifier with 3 different magnifications. Fast and easy to put on and off by cotton adhesion. It is also suitable for spectacle wearers.

First lenses (1) 1.8x. The lenses (2) under the peak can be added by quick-action clip closure for magnification 2.3x. For quick microscopic view lens (3) can be added for higher magnification (4.8x).

The peak and headband are made of high-grade plastic. The front pad is made of skin-friendly soft plastic which guarantees a comfortable use.



Art.-Nr. 01.5002.

wie oben, jedoch mit 2 seitlichen Lichtquellen zur Ausleuchtung des Arbeitsfeldes. Neu: jetzt mit LED! Die seitlichen Glühbirnen wurden durch energiesparende LED's ersetzt, bei gleicher Lichtausbeute erhöht sich die Lebensdauer der Batterien.

Lieferung ohne Batterien, benötigt werden 4 x 1,5 V.

Art.-No. 01.5002.

as above, additionally equipped with lightings.

New: now with LED, the bulbs were replaced by power saving LEDs.

Delivery without batteries.

Required are 4 x 1.5 V.

Lupenleuchten



● Lupenlampe mit Linsenabdeckung

Art.-Nr. 01.5010.

Vergrößerung: 3 Dioptrien (= 1,75x)
 Linsengröße: 18 x 15 cm
 Linsenmaterial: Glas
 Leuchtmittel: 2 x 9 W (im Lieferumfang enthalten)
 Farbe: weiß
 Schwenkbereich: ca. 90 cm
 Schwenkarm in jeder Position fixierbar
 Montage: Tischklemme (standard)

Optional zusätzlich erhältlich:

01.5011. Ersatzlinse 3D
 01.5021. Wandbefestigung
 01.5022. Tischständer 6,4 kg, 32 x 24 x 6 cm
 01.5023. Bodenständer (rollbar) 8,3 kg, Ø 65 cm, Höhe: 70 cm

● Magnifier Lamp

Art. No. 01.5010.

Magnification: 3 Diopter (= 1.75x)
 Lense size: 18 x 15 cm
 Material: glas lense
 Lamp: 2 x 9 W
 Colour: white
 Extension arm reach: 90 cm
 Arm fixable in each position
 Standard mount: table bracket

Optional mount : table base, heavy floor stand, wall bracket

01.5011. replacement lense 3D
 01.5021. wall bracket
 01.5022. table base 10 kg, 32 x 24 x 6 cm
 01.5023. trolley floor stand 11.4 kg, Ø 65 cm x 70 cm

Küvettenteknik



● Küvettenbügel V2A Gr. 1 - 3

Art.-Nr. 02.0011. - Größe 1

Art.-Nr. 02.0012. - Größe 1-2

Art.-Nr. 02.0013. - Größe 1-3

Küvettenbügel aus Nirostastahl komplett mit Haltebügel und Schraubenschlüssel für das Einspannen der Küvetten in einer Presse. Diese Bügelform garantiert während des ganzen Polymerisationsvorgangs einen konstanten Druck auf die Küvette. Mit dem praktischen Haltebügel kann nach der Polymerisation der Küvettenbügel gefahrlos aus dem kochenden Wasser genommen werden.

Der Küvettenbügel ist in verschiedenen Größen für die Aufnahme von 1 bis 3 Küvetten lieferbar.

Säulenabstand 10,7 cm

● Flask Bows high grade steel

Art.-No. 02.0011. - size 1

Art.-No. 02.0012. - size 1-2

Art.-No. 02.0013. - size 1-3

High grade steel flask-bows with support bow and wrench, for stretching the flasks in a press. These flask bows guarantee a steady pressure during the polymerisation. With the support bow the flask bows can be taken without any risk out of the boiling water.

The flask bows are available in 3 different sizes for 1 - 3 flasks.

Distance between columns 10.7 cm



● Messingküvette

Art.-Nr. 02.0050.

Robuste Messingküvette in Standardgröße.

Innenmaße: 7,2 x 8,4 x 5,0 cm


● Dental Flask

Art.-No. 02.0050.

Casted, strong flask, made out of brass.

Size inside: 7.2 x 8.4 x 5.0 cm

Unterfütterungsgeräte

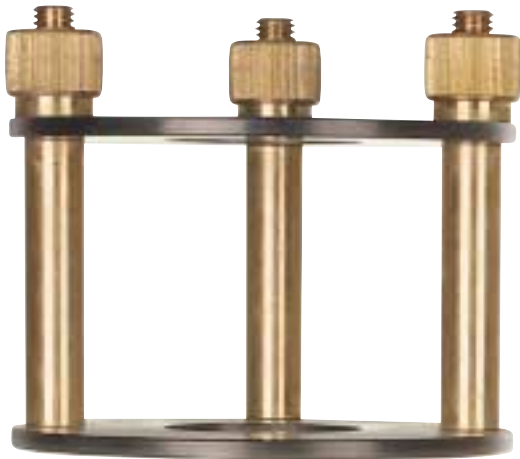

● Unterfütterungsgerät 3 S

Art.-Nr. 03.0020.

Einfaches, präzises Unterfütterungsgerät mit Schnellspannschrauben. Das Gerät ist aus nicht rostendem Metall, die Säulen sind aus Messing. Die Schnellspannschrauben ermöglichen ein schnelles und vor allem gleichmäßiges Schließen des Gerätes. Bisserrhöhungen werden somit fast vollkommen ausgeschlossen.

Abmessung: ø 11 cm x 10 cm

● Rebasing Device 3 S

Art.-No. 03.0020.

Simple but precise rebasing device with quick action collet nuts. The metal plates are stainless steel, the columns are brass. The quick-action collet nuts make it easy to close the device and ensure that it will always be closed in the same position. The risk of bite rising is reduced to a minimum.

Size: ø 11 cm x 10 cm



● Unterfütterungsgerät K 2S

Art.-Nr. 03.0030. - Unterfütterungsgerät K 2S (Abb. rechts)

Anwenderfreundliche Präzisionsunterfütterungsgeräte mit konisch geteilten Säulen und Schnellspannschrauben. Markierungsrillen an den Säulen bieten eine optische Kontrolle beim Zusammensetzen der Geräte. Die konische Führung der Säulen garantiert absolute Präzision.

Abmessung: ø 11 cm x 10 cm

● Rebasing Device K 2S

Art.-No. 03.0030. - Rebasing device K 2S (see right)

Handsome, high precise rebasing device with conically divided columns. The conical guided columns and a control mark guarantee optimal rebasing results.

These devices are also closed by quick-action collet nuts.

Size: ø 11 cm x 10 cm

Magnetständer



● Magnetständer

Art.-Nr. 11.9900.

Standfester drehbarer Magnetbohrerhalter aus rostfreiem Material. Magnetplatte ø 115 mm, Höhe 103 mm. Farbe: grau



● Magnetic Bur Holder

Art.-No. 11.9900.

Turnable magnetic bur holder ø 115 mm, 103 mm high. Colour: grey



● Magnetständer S

Art.-Nr. 11.9910.

wie 11.9900., zusätzlich mit 6 Töpfchen für die Aufnahme von nicht magnetischen Schleifkörpern. Farbe: rot



● Magnetic Bur Holder S

Art.-No. 11.9910.

As 11.9900., additionally equipped with 6 cases for non-magnetic burs. Colour: red

Ofenzange

● Brenngutträgerpinzette

Art.-Nr. 11.3580. - 30 cm

● Firing tray tweezer

Art.-No. 11.3580. - 30 cm

● Muffelzange

Art.-Nr. 11.8220. - 43 cm

● Furnace tongs

Art.-No. 11.8220. - 43 cm

● Muffelzange

Art.-Nr. 11.8210. - 31 cm

● Furnace tongs

Art.-No. 11.8210. - 31 cm



● Mischbecher (Silikon)

Art.-Nr. 02.4005. - 5 ml

Art.-Nr. 02.4010. - 10 ml

Art.-Nr. 02.4015. - 15 ml

Art.-Nr. 02.4030. - 30 ml

Art.-Nr. 02.4050. - 50 ml

Art.-Nr. 02.4095. - 95 ml

● Mixing cups (silicone)

Art.-No. 02.4005. - 5 ml

Art.-No. 02.4010. - 10 ml

Art.-No. 02.4015. - 15 ml

Art.-No. 02.4030. - 30 ml

Art.-No. 02.4050. - 50 ml

Art.-No. 02.4095. - 95 ml

Gusstrichterformer



● Gusstrichterformer

Form H

Art.-Nr. 04.1001. - Größe 1x

Art.-Nr. 04.1003. - Größe 3x

Art.-Nr. 04.1006. - Größe 6x

Art.-Nr. 04.1009. - Größe 9x

Strapazierfähige, elastische Gummiformen mit Metallboden, auch für die Druckeinbettung geeignet.

● Funnel Former

Shape H

Art.-No. 04.1001. - size 1x

Art.-No. 04.1003. - size 3x

Art.-No. 04.1006. - size 6x

Art.-No. 04.1009. - size 9x

Durable flexible rubber forms with metal bottom, suitable for vacuum investment.



● Gusstrichterformer

Form D

Art.-Nr. 04.2000. - universal o. Metallboden

Art.-Nr. 04.2001. - Größe 1x

Art.-Nr. 04.2003. - Größe 3x

Art.-Nr. 04.2006. - Größe 6x

Art.-Nr. 04.2009. - Größe 9x

Strapazierfähige, elastische Gummiformen mit Metallboden, auch für die Druckeinbettung geeignet.

● Funnel Former

Shape D

Art.-No. 04.2000. - universal no metal bottom

Art.-No. 04.2001. - size 1x

Art.-No. 04.2003. - size 3x

Art.-No. 04.2006. - size 6x

Art.-No. 04.2009. - size 9x

Durable flexible rubber forms with metal bottom, suitable for vacuum investment.



● Gussküvetten

Art.-Nr. 04.9001. - Größe 1x

Art.-Nr. 04.9003. - Größe 3x

Art.-Nr. 04.9006. - Größe 6x

Art.-Nr. 04.9009. - Größe 9x

● Casting Rings

Art.-No. 04.9001. - size 1x

Art.-No. 04.9003. - size 3x

Art.-No. 04.9006. - size 6x

Art.-No. 04.9009. - size 9x

Modellerstellung



● Split-Cast Sortiment

Art.-Nr. 04.5000.

1 x Sockelplatte blau 8 cm
1 x Gummiring
10 St. Rundmagnete
10 St. Magnettöpfe
10 St. Haftscheiben

● Split-Cast Sortiment

Art.-No. 04.5000.

1 x Base Former blue 8 cm
1 x Rubber Ring
10 pcs magnets
10 pcs magnet cases
10 pcs metal plates



● Split-Cast Basisplatte

Art.-Nr. 04.5006. - rot 7 cm mit Gummiring
Art.-Nr. 04.5001. - blau 8 cm mit Gummiring
Art.-Nr. 04.5008. - gelb 9 cm mit Gummiring

Gummiring

Art.-Nr. 04.5007. - für Basisplatte rot 7 cm
Art.-Nr. 04.5003. - für Basisplatte blau 8 cm
Art.-Nr. 04.5009. - für Basisplatte gelb 9 cm

● Split-Cast Base Former

Art.-No. 04.5006. - red 7 cm with rubber ring
Art.-No. 04.5001. - blue 8 cm with rubber ring
Art.-No. 04.5008. - yellow 9 cm with rubber ring

Rubber Ring

Art.-No. 04.5007. - for base plate red 7 cm
Art.-No. 04.5003. - for base plate blue 8 cm
Art.-No. 04.5009. - for base plate yellow 9 cm

Modellerstellung



Modellsäge

Art.-Nr. 11.1080. - gerade
Art.-Nr. 11.1081. - gebogen



Model Saw

Art.-No. 11.1080. - straight
Art.-No. 11.1081. - curved



Twin Pin

Art.-Nr. 07.0010. - 1000 St./Pckg.
mit Metallhülsen und Schutzkappen aus Gummi
Länge: 19,4 mm Kopflänge: 5,0 mm ø 1,8 mm

Twin Pin

Art.-No. 07.0010. - 1000 pcs/unit
with metal boxes and rubber covers
length: 19.4 mm length of head: 5.0 mm ø 1.8 mm



Pin mit Hülse für Pindex-System

mit konisch zulaufendem Ende in drei Größen:
Art.-Nr. 07.0050.
Länge: 20,0 mm Kopflänge: 4,0 mm ø 2,0 mm
Art.-Nr. 07.0054.
Länge: 16,0 mm Kopflänge: 4,0 mm ø 2,0 mm
Art.-Nr. 07.0058.
Länge: 10,0 mm Kopflänge: 4,0 mm ø 2,0 mm

Pin with sleeve for Pindex System

conical shaped ends in three sizes:
Art.-No. 07.0050.
length: 20.0 mm length of head: 4.0 mm ø 2.0 mm
Art.-No. 07.0054.
length: 16.0 mm length of head: 4.0 mm ø 2.0 mm
Art.-No. 07.0058.
length: 10.0 mm length of head: 4.0 mm ø 2.0 mm



Pin für Zeiser-System

Art.-Nr. 07.0030. - 1000 St./Pckg.
Länge: 14,0 mm Kopflänge: 6,4 mm ø 1,95 mm

Pin for Zeiser System

Art.-No. 07.0030. - 1000 pcs/unit
length: 14.0 mm length of head: 6.4 mm ø 1.95 mm



Dowel Pin

Art.-Nr. 07.0080. - 1000 St./Pckg.
Länge: 22,0 mm Kopflänge: 5,0 mm ø 1,95 mm

Dowel Pin

Art.-No. 07.0080. - 1000 pcs/unit
length: 22.0 mm length of head: 5.0 mm ø 1.95 mm

Gipsinstrumente



● Gipsmesser nach Gritmann

Art.-Nr. 11.1010. - mit Küvettenöffner

● Plaster Knife Gritmann

Art.-No. 11.1010. - with flask opener



● Gipsmesser Nr. 6

Art.-Nr. 11.1020.

● Plaster Knife No. 6

Art.-No. 11.1020.



● Gipsmesser Nr. 7

Art.-Nr. 11.1030.

● Plaster Knife No. 7

Art.-No. 11.1030.



● Gipsspatel Roghe

Art.-Nr. 11.1060.
rostfrei, S-förmig gebogen, 20 cm lang

● Plaster Spatula Roghe

Art.-No. 11.1060.
20 cm, stainless, S-shaped



● Gipsspatel Lichtenstein

Art.-Nr. 11.1070.
rostfrei, 17 cm lang

● Plaster Spatula Lichtenstein

Art.-No. 11.1070.
stainless, 17 cm



● Gipsschneidezange

Art.-Nr. 11.1095.
rostfrei, robuste Ausführung, 20 cm lang

● Plaster Forceps

Art.-No. 11.1095.
stainless, strong shape, 20 cm

Wachsmesser



● Wachsmesser Ermert

Art.-Nr. 11.2010.

● Wax Knife Ermert

Art.-No. 11.2010.



● Wachsmesser Fahnenstock

Art.-Nr. 11.2020. - 13 cm lang, Kunststoffgriff

Art.-Nr. 11.2022. - 13 cm lang, Holzgriff

Art.-Nr. 11.2025. - 17 cm lang, Kunststoffgriff

Art.-Nr. 11.2027. - 17 cm lang, Holzgriff

● Wax Knife Fahnenstock

Art.-No. 11.2020. - 13 cm, plastic handle

Art.-No. 11.2022. - 13 cm, wooden handle

Art.-No. 11.2025. - 17 cm, plastic handle

Art.-No. 11.2027. - 17 cm, wooden handle



● Wachsmesser Lessmann

Art.-Nr. 11.2021. - 13 cm lang

Art.-Nr. 11.2026. - 17 cm lang

● Wax Knife Lessmann

Art.-No. 11.2021. - 13 cm

Art.-No. 11.2026. - 17 cm



● Wachsmesser Antkoviak

Art.-Nr. 11.2035. - Antkoviak mit geschraubter Klinge

Art.-Nr. 11.2036. - Ersatzschraubklinge

● Wax Knife Antkoviak

Art.-No. 11.2035. - Knife with screwed blade

Art.-No. 11.2036. - Replacement blade, screwed

K + B Instrumente



● **K + B Instrument gold**

Art.-Nr. 11.3310.

● **Veneer Instrument gold**

Art.-No. 11.3310.



● **K + B Instrument rot**

Art.-Nr. 11.3320.

● **Veneer Instrument red**

Art.-No. 11.3320.



● **K + B Instrument blau**

Art.-Nr. 11.3330.

● **Veneer Instrument blue**

Art.-No. 11.3330.



● **K + B Instrument Nr. 1**

Art.-Nr. 11.3340.

● **Veneer Instrument No. 1**

Art.-No. 11.3340.



● **K + B Instrument Nr. 2**

Art.-Nr. 11.3350.

● **Veneer Instrument No. 2**

Art.-No. 11.3350.



● **K + B Instrument Nr. 3**

Art.-Nr. 11.3360.

● **Veneer Instrument No. 3**


Art.-No. 11.3360.

Modellierinstrumente




● Le Cron

Art.-Nr. 11.2110. - gebogen/curved
Art.-Nr. 11.2115. - gerade/straight

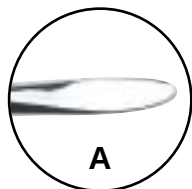

A

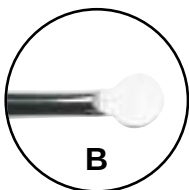

B



● Zahle

Art.-Nr. 11.2120. - Form A / Shape A
Art.-Nr. 11.2121. - Form B / Shape B



● Vehe

Art.-Nr. 11.2130.



● Roach

Art.-Nr. 11.2140.



● Beale

Art.-Nr. 11.2150.



● Zahle groß

Art.-Nr. 11.2160.



● Gritmann Spatel

Art.-Nr. 11.2170.

Modellierinstrumente



● **PKT Color Nr. 1**

Art.-Nr. 11.3111. gold



● **PKT Color Nr. 2**

Art.-Nr. 11.3112. grün/green



● **PKT Color Nr. 3**

Art.-Nr. 11.3113. blau/blue



● **PKT Color Nr. 4**

Art.-Nr. 11.3114. rot/red



● **PKT Color Nr. 5**

Art.-Nr. 11.3115. silber/silver

Modellierinstrumente



● **PKT Instrument Nr. 1**

Art.-Nr. 11.3101.



● **PKT Instrument Nr. 2**

Art.-Nr. 11.3102.



● **PKT Instrument Nr. 3**

Art.-Nr. 11.3103.



● **PKT Instrument Nr. 4**

Art.-Nr. 11.3104.



● **PKT Instrument Nr. 5**

Art.-Nr. 11.3105.

● **Set PKT Instrumente Nr. 1 - 5**

Art.-Nr. 11.3100.

● **Set PKT Instruments No. 1 - 5**

Art.-No. 11.3100.

Modellierinstrumente



● PKT Color Set

Art.-Nr. 11.3110. im Etui



● Spreizpinzette mit Dehnschraube

Art.-Nr. 11.3260. - gerade
Art.-Nr. 11.3265. - gebogen

● Tweezers with extending screw

Art.-No. 11.3260. - straight
Art.-No. 11.3265. - curved

Keramikinstrumente



● Kondensierspatel

Art.-Nr. 11.3210.

● Condensation Spatula

Art.-No. 11.3210.



● Riffelinstrument

Art.-Nr. 11.3220.

● Grooving Instrument

Art.-No. 11.3220.



● Gravierinstrument

Art.-Nr. 11.3230.

● Engraving Instrument

Art.-No. 11.3230.



● Dünnes Messer

Art.-Nr. 11.3240.

● Thin Knife

Art.-No. 11.3240.



● Portionierer

Art.-Nr. 11.3250. - klein, ø 4/6 mm
Art.-Nr. 11.3255. - groß, ø 8/12 mm

● Portioner

Art.-No. 11.3250. - small, ø 4/6 mm
Art.-No. 11.3255. - large, ø 8/12 mm

Keramikinstrumente



● Keramiker-Set

Art.-Nr. 11.3200.
9-teilig im Etui, bestehend aus:
Kondensierspatel
Riffelinstrument
Gravierinstrument
dünnes Messer
Portionierer klein und groß
Halteklammer gerade und gebogen
Halteklammer mit Diamantspitzen.

● Ceramic-Instrument-Set

Art.-No. 11.3200.
9 pieces including:
Condensation Spatula
Grooving Instrument
Engraving Instrument
Thin Knife
Portioner small and large
Mosquito Forceps straight and curved
Clamp with diamond tips.

Instrumente



● Instrumentenset

Art.-Nr. 11.2000.

10teilig im Etui, bestehend aus:

Tasterzirkel,
Mosquitoklemme gerade und gebogen,
Folienschere gerade,
Lötpinzette,
Collegepinzette,
Wachsmesser groß und klein,
Le Cron und
Zahle.

● Instrument Set

Art.-No. 11.2000.

10 pieces, including:

Iwanson Caliper,
Mosquito Forceps straight and curved,
Foil Scissors straight,
Soldering Tweezer,
College Tweezer,
Wax Knife small and large,
Le Cron and
Zahle.

Klemmen + Pinzette


● Halteklemme Mosquito

Art.-Nr. 11.3810. - gerade
Art.-Nr. 11.3815. - gebogen
rostfrei, 12,5 cm



● Mosquito Forceps

Art.-No. 11.3810. - straight
Art.-No. 11.3815. - curved
stainless, 12.5 cm

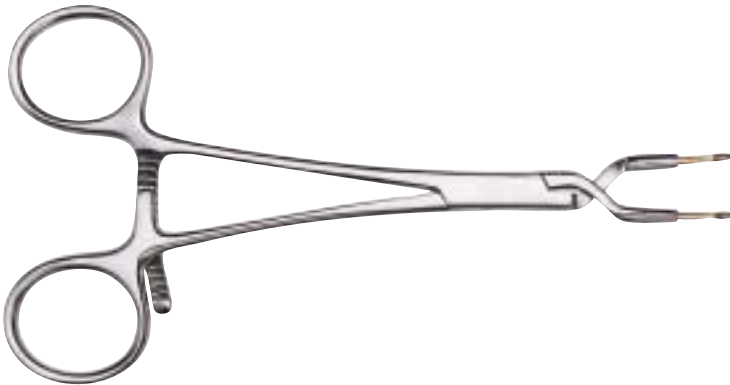

● Halteklemme

Art.-Nr. 11.3850.
rostfrei, mit Diamantspitzen

● Clamp

Art.-No. 11.3850.
stainless, with diamond tips



● Lötpinzette

Art.-Nr. 11.3520. - gebogen
Art.-Nr. 11.3525. - gerade
rostfrei

● Soldering Tweezer

Art.-No. 11.3520. - curved
Art.-No. 11.3525. - straight
stainless



● Wabenbrenngutträger mit Keramikstiften

Art.-Nr. 11.3290. Set bestehend aus 2 Wabenbrenngut-trägern ø 8 cm und 20 Keramikstiften

Keramikstifte für Wabenbrenngutträger
Art.-Nr. 11.3295. - 10 St.

● Honeycomb Firing Tray with ceramic pins

Art.-No. 11.3290. Set with 2 trays ø 8 cm and 20 ceramic pins

Ceramic pins for honeycomb firing tray
Art.-No. 11.3295. - 10 pcs

Laborzangen



● Teleskopkronenzange diamantiert

Art.-Nr. 06.0030. - 12 cm
Art.-Nr. 06.0040. - 15 cm
diamantiert, Körnung D 107

● Telescope-crown Plier diamond coated

Art.-No. 06.0030. - 12 cm
Art.-No. 06.0040. - 15 cm
diamond coated, grain size D 107




● Teleskopzange FG

Art.-Nr. 06.0050.
Größe 11,6 cm, auswechselbare Spitzen für Diamanten mit FG-Schaft (Lieferung mit Einsätzen).

● Telescope Plier FG

Art.-No. 06.0050.
11.6 cm, for replaceable diamond tips $\varnothing$ 1.6 mm.

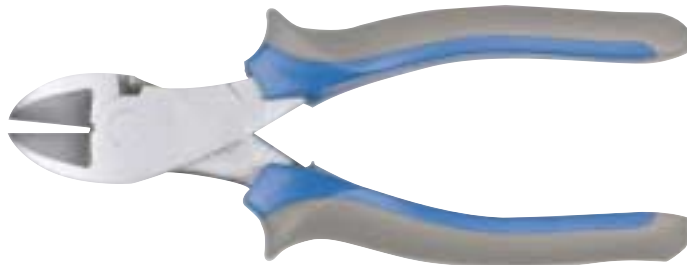

● Seitenschneider

Art.-Nr. 11.8230.
Größe 18 cm, für harte Drähte max. $\varnothing$ 2,0 mm

● Side Cutter

Art.-Nr. 11.8230.
18 cm, for hard wires max. $\varnothing$ 2.0 mm



● Waldsachs-Zange

Art.-Nr. 11.8160.

● Waldsachs Plier

Art.-No. 11.8160.

Drahtbiegeezangen



● Universal-Kramponzange

Art.-Nr. 11.8150.

● Universal Plier

Art.-No. 11.8150.

● Aderer Zange groß

Art.-Nr. 11.8120.

Bügelbiegezange 15 cm max. $\varnothing$ 1,5 mm

● Bar bending plier

Art.-No. 11.8120. - 15 cm max. $\varnothing$ 1.5 mm



● Aderer Zange

Art.-Nr. 11.8110. - klein 12 cm

max. $\varnothing$ 0,7 mm

Art.-Nr. 11.8115. - mittel 13 cm

max. $\varnothing$ 0,9 mm

● Aderer Plier

Art.-No. 11.8110. - small 12 cm

max. $\varnothing$ 0.7 mm

Art.-No. 11.8115. - medium 13 cm

max. $\varnothing$ 0.9 mm



● Flachzange spitz

Art.-Nr. 11.8180. - Spitzen glatt

Art.-Nr. 11.8185. - Spitzen gerieft

● Plier flat nose

Art.-No. 11.8180. - tips smooth

Art.-No. 11.8185. - tips serrated



● Adams

Art.-Nr. 11.8130. - 13,5 cm

● Adams

Art.-Nr. 11.8130. - 13.5 cm



Drahtbiegezangen



● Angle

Art.-Nr. 11.8135. - 13 cm

● Angle

Art.-No. 11.8135. - 13 cm

● Hohlkehlzange

Art.-Nr. 11.8140. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 1,0 mm

● Wire bending plier

Art.-No. 11.8140. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 1.0 mm



● Rundzange

Art.-Nr. 11.8145. - 13 cm

● Round nose plier

Art.-No. 11.8145. - 13 cm

● Young

Art.-Nr. 11.8170. - 14 cm max. $\varnothing$ 0,7 mm

● Young

Art.-No. 11.8170. - 14 cm max. $\varnothing$ 0.7 mm



● Pfeilformzange

Art.-Nr. 11.8190. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 0,7 mm

● Arrow clasp former

Art.-Nr. 11.8190. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 0.7 mm



● Pfeilknickzange

Art.-Nr. 11.8195. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 0,7 mm

● Arrow clasp bending plier

Art.-No. 11.8195. - Schwarz 13 cm max. $\varnothing$ 0.7 mm



Scheren

● Folienschere

Art.-Nr. 11.4150. - gerade
Art.-Nr. 11.4155. - gebogen

● Foil Scissors

Art.-No. 11.4150. - straight
Art.-No. 11.4155. - curved



● Kronenschere, gezahnt

Art.-Nr. 11.4160. - gerade
Art.-Nr. 11.4165. - gebogen
rostfrei, 11,5 cm

● Crown Scissors, saw edge

Art.-No. 11.4160. - straight
Art.-No. 11.4165. - curved
stainless, 11,5 cm



● Zahnfleischschere

Art.-Nr. 11.4170. - gerade
Art.-Nr. 11.4175. - gebogen
rostfrei, 11 cm

● Gum Scissors

Art.-No. 11.4170. - straight
Art.-No. 11.4175. - curved
stainless, 11 cm



● Gingivektomieschere

Art.-Nr. 11.4180.
rostfrei



● Goldmann-Fox Scissors

Art.-No. 11.4180.
stainless



● Skalpellgriff Nr. 3

Art.-Nr. 11.4100.
rostfrei



● Scalpel Handle No. 3

Art.-No. 11.4100.
stainless



Pinzetten



● College Pinzette

Art.-Nr. 11.3540. - Spitzen gerieft
Art.-Nr. 11.3546. - Spitzen kurz und gerieft
rostfrei



● College Tweezer

Art.-No. 11.3540. - tips serrated
Art.-No. 11.3546. - serrated short tips
stainless



● Artikulationsfolienpinzette nach Miller

Art.-Nr. 11.3560.
rostfrei



● Paper Tweezer Miller straight

Art.-No. 11.3560.
stainless



● Pinzette Meriam

Art.-Nr. 11.3550.
Spitzen gerieft 160 mm



● Tweezers Meriam

Art.-No. 11.3550.
serrated tips, 160 mm



● Pinzette Perry

Art.-Nr. 11.3555.
Spitzen gerieft 130 mm



● Tweezers Perry

Art.-No. 11.3555.
serrated tips, 130 mm



● Anatomische Pinzette

Art.-Nr. 11.3570.
140 mm



● Dressing Forceps

Art.-No. 11.3570.
140 mm



● Chirurgische Pinzette

Art.-Nr. 11.3575.
140 mm



● Tissue Forceps

Art.-No. 11.3575.
140 mm

Zahnsonden

33



● Zahnsonde
Fig. 8 RS

Art.-Nr. 11.5110.

● Probe
shape 8

Art.-No. 11.5110.



● Zahnsonde
Fig. 9 RS

Art.-Nr. 11.5120.

● Probe
shape 9

Art.-No. 11.5120.



● Zahnsonde
Fig. 17 RS

Art.-Nr. 11.5130.

● Probe
shape 17

Art.-No. 11.5130.




● Zahnsonde
Fig. 23 RS

Art.-Nr. 11.5140.

● Probe
shape 23

Art.-No. 11.5140.

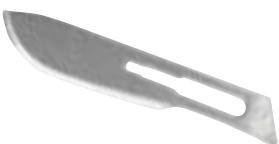

● Skalpellschneiden


unsteril, nur für technische Zwecke

Art.-Nr. 11.4110. - Form 10 - 100 St./Packung

Art.-Nr. 11.4111. - Form 11 - 100 St./Packung

Art.-Nr. 11.4112. - Form 12 - 100 St./Packung

Art.-Nr. 11.4115. - Form 15 - 100 St./Packung

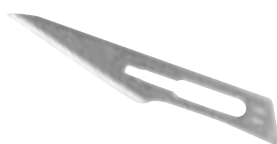

● Surgical Blades

not sterilized, only for technical use

Art.-No. 11.4110. - shape 10 - 100 pcs/unit

Art.-No. 11.4111. - shape 11 - 100 pcs/unit

Art.-No. 11.4112. - shape 12 - 100 pcs/unit

Art.-No. 11.4115. - shape 15 - 100 pcs/unit

Füllungsinstrumente



● Füllungsinstrument 1,0/1,3

Art.-Nr. 11.5210.
Kugel 1,0 / 1,3 mm



● Filling Instrument 1.0/1.3

Art.-No. 11.5210.
bowl 1.0 / 1.3 mm



● Füllungsinstrument 1,4/1,8

Art.-Nr. 11.5215.
Kugel 1,4 / 1,8 mm



● Filling Instrument 1.4/1.8

Art.-No. 11.5215.
bowl 1.4 / 1.8 mm



● Füllungsinstrument 1,9/2,3

Art.-Nr. 11.5220.
Kugel 1,9 / 2,3 mm



● Filling Instrument 1.9/2.3

Art.-No. 11.5220.
bowl 1.9 / 2.3 mm



● Füllungsinstrument 2,5/3,0

Art.-Nr. 11.5225.
Kugel 2,5 / 3,0 mm



● Filling Instrument 2.5/3.0

Art.-No. 11.5225.
bowl 2.5 / 3.0 mm



● Füllungsinstrument 1,0/1,2

Art.-Nr. 11.5250.
plan 1,0 / 1,2 mm



● Filling Instrument 1.0/1.2

Art.-No. 11.5250.
plane 1.0 / 1.2 mm



● Füllungsinstrument 1,2/1,5

Art.-Nr. 11.5255.
plan 1,2 / 1,5 mm



● Filling Instrument 1.2/1.5

Art.-No. 11.5255.
plane 1.2 / 1.5 mm



● Füllungsinstrument 1,8/2,0

Art.-Nr. 11.5260.
plan 1,8 / 2,0 mm



● Filling Instrument 1.8/2.0

Art.-No. 11.5260.
plane 1.8 / 2.0 mm

Spatel



● Heidemann Spatel

Art.-Nr. 11.5310. - schmal
Art.-Nr. 11.5315. - mittel
Art.-Nr. 11.5320. - breit



● Spatula Heidemann

Art.-No. 11.5310. - small
Art.-No. 11.5315. - medium
Art.-No. 11.5320. - large



● Zementspatel

Art.-Nr. 11.5340. - schmal
Art.-Nr. 11.5345. - mittel
Art.-Nr. 11.5350. - breit



● Cement Spatula

Art.-No. 11.5340. - small
Art.-No. 11.5345. - medium
Art.-No. 11.5350. - large

Nadelhalter

● Nadelhalter Mathieu

Art.-Nr. 11.8530. - HM 14 cm
Art.-Nr. 11.8535. - HM 17 cm



● Needle Holder TC

Art.-No. 11.8530. - TC 14 cm
Art.-No. 11.8535. - TC 17 cm



● Hohlmeißelzange RS

Art.-Nr. 11.8510. - normal
Art.-Nr. 11.8515. - mini



● Rongeur Forceps

Art.-No. 11.8510. - normal
Art.-No. 11.8515. - small



● Absaugkanülen

Art.-Nr. 11.5410. - 1,5 mm
Art.-Nr. 11.5415. - 3,0 mm
Art.-Nr. 11.5420. - 5,0 mm



● Suction Tubes

Art.-No. 11.5410. - 1,5 mm
Art.-No. 11.5415. - 3,0 mm
Art.-No. 11.5420. - 5,0 mm

● Mundspiegelgriff RS

Art.-Nr. 11.5450.
Sechskant, hohl, rostfrei



● Mirror Handle

Art.-No. 11.5450.
hollow, stainless



Zahnzangen



● Zahnzange - UK-Wurzeln

Art.-Nr. 11.8590.



● Forceps - roots lower jaw

Art.-No. 11.8590.



● Zahnzange - OK-Wurzeln

Art.-Nr. 11.8595.



● Forceps - roots upper jaw

Art.-No. 11.8595



● Wurzelheber Bein

Art.-Nr. 11.5370. - schmal
Art.-Nr. 11.5375. - mittel
Art.-Nr. 11.5380. - breit



● Root Elevator

Art.-No. 11.5370. - small
Art.-No. 11.5375. - medium
Art.-No. 11.5380. - large



● Bracketabnehmzange

Art.-Nr. 11.8520. - gerade 13,5 cm
Art.-Nr. 11.8525. - gebogen 13,5 cm



● Bracket removing plier

Art.-Nr. 11.8520. - straight 13,5 cm
Art.-Nr. 11.8525. - curved 13,5 cm

Zahnzangen anatomischer Griff



● Zahnzange 47 46 | 36 37
Art.-Nr. 11.8540.



● Extracting Forceps 47 46 | 36 37
Art.-No. 11.8540.



● Zahnzange 45 44 | 34 35
Art.-Nr. 11.8560.



● Extracting Forceps 45 44 | 34 35
Art.-No. 11.8560.



● Zahnzange 43 - 41 | 31 - 33
Art.-Nr. 11.8570.



● Extracting Forceps 43 - 44 | 34 - 35
Art.-No. 11.8570.



● Zahnzange 48 | 38
Art.-Nr. 11.8580.



● Extracting Forceps 48 | 38
Art.-No. 11.8580.

Zahnzangen anatomischer Griff



● **Zahnzange** 17 16 |
Art.-Nr. 11.8545.



● **Extracting Forceps** 17 16 |
Art.-No. 11.8545.



● **Zahnzange** | 26 27
Art.-Nr. 11.8550.



● **Extracting Forceps** | 26 27
Art.-No. 11.8550.



● **Zahnzange** 15 14 | 24 25
Art.-Nr. 11.8565.



● **Extracting Forceps** 15 14 | 24 25
Art.-No. 11.8565.



● **Zahnzange** 13 - 11 | 21 - 23
Art.-Nr. 11.8575.



● **Extracting Forceps** 13 - 11 | 21 - 23
Art.-No. 11.8575.



● **Zahnzange** 18 | 28
Art.-Nr. 11.8585.



● **Extracting Forceps** 18 | 28
Art.-No. 11.8585.

Zahnzangen



● **Zahnzange** 47 46 | 36 37
Art.-Nr. 11.8541. - englische Form



● **Extracting Forceps** 47 46 | 36 37
Art.-No. 11.8541. - Englisch pattern



● **Zahnzange** 45 44 | 34 35
Art.-Nr. 11.8561. - englische Form



● **Extracting Forceps** 45 44 | 34 35
Art.-No. 11.8561. - Englisch pattern



● **Zahnzange** 48 | 38
Art.-Nr. 11.8581. - englische Form



● **Extracting Forceps** 48 | 38
Art.-No. 11.8581. - Englisch pattern



● **Zahnzange - UK-Wurzeln**
Art.-Nr. 11.8591. - englische Form



● **Forceps - roots lower jaw**
Art.-No. 11.8591. - Englisch pattern



● **Zahnzange - OK-Wurzeln**
Art.-Nr. 11.8596. - englische Form



● **Forceps - roots upper jaw**
Art.-No. 11.8596. - Englisch pattern

Zahnzangen



● Zahnzange 17 16 |

Art.-Nr. 11.8546. - englische Form



● Extracting Forceps 17 16 |

Art.-No. 11.8546. - English pattern



● Zahnzange | 26 27

Art.-Nr. 11.8551. - englische Form



● Extracting Forceps | 26 27

Art.-No. 11.8551. - English pattern



● Zahnzange 15 14 | 24 25

Art.-Nr. 11.8566. - englische Form



● Extracting Forceps 15 14 | 24 25

Art.-No. 11.8566. - English pattern



● Zahnzange 13 - 11 | 21 - 23

Art.-Nr. 11.8576. - englische Form



● Extracting Forceps 13 - 11 | 21 - 23

Art.-No. 11.8576. - English pattern



● Zahnzange 18 | 28

Art.-Nr. 11.8586. - englische Form



● Extracting Forceps 18 | 28

Art.-No. 11.8586. - English pattern

Instrumentenpflege

Desinfektion chemisch

- Kontaminierte Instrumente in eine geeignete Desinfektionslösung legen
- Gelenkinstrumente immer öffnen
- Nur geeignete Desinfektionen verwenden und Herstellerangaben beachten
- Desinfektionslösungen täglich erneuern

Desinfektion thermisch

- Bei maschineller Reinigung Instrumente sicher verankern
- Gelenkinstrumente immer öffnen
- Beim Reinigungsmittel die Herstellerangaben beachten
- Verschmutzte Instrumente grundsätzlich vorreinigen
- Instrumente nach erfolgter Reinigung und Desinfektion sofort aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls nachtrocknen

Ultraschall

- Bei stark sauren Reinigungsmittel (Zemententferner) Herstellerangaben (Dosierung/Frequenz/Einwirkzeit/Temperatur) beachten
- Achtung: Instrumente werden sonst abgebeizt und verfärben sich dunkel

Reinigung

- Bei fest haftenden Verunreinigungen ist die Verwendung einer feinen Bürste (keine Metallbürste) empfohlen
- Instrumente danach sorgfältig trocknen, Gelenke ölen

Empfohlen wird eine alkalische, aldehydfreie Reinigung

Sterilisation

- Die Instrumente müssen vor der Sterilisation absolut trocken sein
- AUTOKLAV: nur destilliertes Wasser verwenden, Becken regelmäßig auf Verschmutzung kontrollieren
- HEISSLUFTSTERILISATOR: Temperatur max. 180 °C, Zeiten beachten, Geräte ohne Trocknerfunktion sofort öffnen, Herstellerangaben beachten

Wir empfehlen eine Dampfsterilisation bei 134 °C über 20 Minuten

Neue Instrumente

- Neue Instrumente haben produktionsbedingte Fett- und Ölrückstände, daher müssen die Instrumente gründlich gereinigt werden
- Gelenkinstrumente immer im geöffneten Zustand reinigen
- Instrumente nach der Reinigung gründlich trocknen

Empfohlen wird die Verwendung von destilliertem Wasser

Ursachen für Verfärbungen an Instrumenten

- Blutrückstände, Wasserflecken oder ähnliches
- Schmutz im Wasserbecken des Autoklaven:
Achtung diese Partikel können bei hohen Temperaturen in die Metalloberfläche einbrennen
- Alte, beschädigte und verchromte Instrumente aussortieren (Flugrostgefahr!)
- Ölausscheidungen bei Gelenkinstrumenten (häufig bei neuen Instrumenten)
- Reinigung mit Trinkwasser oder destilliertem Wasser von schlechter Qualität, Mineralien aus dem Wasser (Eisen, Mangan, Kupfer usw.) verursachen bräunliche Verfärbungen auf den Instrumenten

Hilfe

Verfärbte Instrumente mit einem trockenen Tuch abreiben und gegebenenfalls mit einer geeigneten Polierpaste (Chrom-Nickel-Politur) reinigen

Ihr Dentaldepot:

AURA-DENTAL

Inhaber Norbert Gelhart
Am Hahn 23 · D-97717 Aura a.d.Saale
Tel. +49 (0) 97 04 41 91 · Fax +49 (0) 97 04 78 05
E-Mail: aura-dental@t-online.de
www.aura-dental.de